

## 12 - NOS REPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES

### COMMENT CA MARCHE ?

Les ultrasons utilisés dans votre POWER 3D génèrent des vibrations ultra-rapides, au rythme de 3 000 000 de fois par seconde.

Ces vibrations ont la propriété d'activer les molécules d'eau.

Appliquées sur la peau, elles entraînent un micro-massage stimulant pour réactiver les processus naturels du rajeunissement et du raffermissment. Déjà utilisés par les professionnels de la beauté depuis plus de 10 ans, les ultrasons apportent leur énergie bénéfique à votre peau.

La lumière rouge monochromatique, qui entoure l'applicateur ultrasonore, produit une énergie positive et stimulante. Les bienfaits de cette énergie participent aussi activement au résultat.

### COMMENT PASSER L'APPAREIL SUR LA PEAU ?

Faites glisser l'applicateur (embout métallique de votre appareil) sur votre peau, en exerçant une légère pression, et en pratiquant des mouvements circulaires pour bien couvrir toute la surface de votre visage.

Veillez au maximum à maintenir l'applicateur en contact avec la peau.

ATTENTION : NE PAS APPLIQUER SANS AVOIR PREALABLEMENT MIS DU GEL SUR LES ZONES DE SOIN.

### A QUELLE FREQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL ?

Une utilisation optimale est à réaliser 2 à 3 fois par semaine. Il est déconseillé de réaliser des applications plus fréquentes.

### COMMENT NETTOYER MON APPAREIL POWER 3D ?

Vous devez entretenir votre appareil en le nettoyant après chaque utilisation. Pour cela, enlevez toutes les traces de gel avec une éponge humide, et séchez ensuite avec un chiffon sec.

IL EST INTERDIT DE PASSER L'APPAREIL SOUS L'EAU, OU DE LE TREMPER.

## 13 - NOS CONSEILS POUR ACCOMPAGNER VOTRE TRAITEMENT POWER 3D

DITES NON AU VIEILLISSEMENT ET GAGNEZ VOTRE COMBAT CONTRE LES RIDES EN APPLIQUANT 3 REGLES FONDAMENTALES :

1) Ayez une bonne hygiène de vie

Hydratez votre organisme en buvant au moins un litre et demi d'eau par jour. Rechargez vos batteries en dormant 8 heures par nuit. Bougez votre corps et stimulez vos muscles (évités les ascenseurs, n'utilisez votre voiture que lorsque c'est indispensable, ayez une activité physique régulière ou faites de la Power Plate). Ayez une alimentation saine en privilégiant les aliments naturels aux produits industriels (préférez le pain, le riz et les pâtes complètes, mangez des légumes et des fruits à volonté, limitez les graisses animales et cuites et utilisez plutôt des huiles végétales en assaisonnement comme l'huile d'olive ou de colza).

2) Power Plate France propose une gamme complète de compléments alimentaires. Utilisez régulièrement des anti-oxydants tels que «Power Plate Actifs anti-âge», véritable complexe anti-radicaux libres, son action vous protège des agressions pouvant induire des perturbations biologiques.

3) Prenez soin de votre peau

Prévenez et ralentissez le vieillissement de votre peau en la stimulant de l'intérieur, en la nourrissant et la protégeant de l'intérieur grâce au système professionnel Power 3D.

## 14 - SERVICE APRES VENTE

La société ANTI-AGING est à votre disposition pour toute intervention sur votre appareil POWER 3D, sous garantie et hors garantie.

ANT-AGING – Port Marina Baie des Anges – 06270 Villeneuve Loubet – France.

Votre point de vente habituel est également à votre disposition, et vous pourrez y acquérir les produits cosmétiques POWER 3D vous permettant une pratique efficace et durable des soins.

### CERTIFICAT DE GARANTIE

Référence du produit – POWER 3D 3008L

Numéro de série .....

Cachet du Vendeur

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, ANTI-AGING assure la garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'utilisation ou les interventions techniques et réparations effectuées par des personnes non qualifiées par ANTI-AGING.

Pour être valable, ce bon doit être :

- 1) Certifié par le vendeur,
- 2) Joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie.

# POWER 3D

## Notice d'utilisation

### Sommaire

- 1 - Introduction, le POWER 3D, c'est quoi ?
- 2 - Contenu du coffret
- 3 - Description de votre appareil
- 4 - Mise en service de votre appareil
- 5 - Réglage de puissance
- 6 - Le programme POWER 3D
- 7 - Phase ACTION en 3 étapes
- 8 - Phase ENTRETIEN quotidienne
- 9 - Coup d'éclat
- 10 - Les produits cosmétiques POWER 3D
- 11 - Conseils de sécurité et contre-indications
- 12 - Les questions les plus fréquentes
- 13 - Conseils pour accompagner votre traitement POWER 3D
- 14 - Service après vente - Garantie

### 1 - LE POWER 3D C'EST QUOI ?

Vous êtes devenu(e) accro à la haute technologie de Power Plate® qui vous permet de remodeler votre corps en six fois moins de temps qu'en musculation traditionnelle, vous allez adorer le Power 3D qui, grâce aux ultrasons alliés à l'utilisation de produits de soins professionnels, vous donne un vrai coup d'éclat en seulement 10 minutes et vous permet de retarder efficacement le vieillissement de votre visage sans passer deux heures chez l'esthéticienne !

Le système Power 3D propose un concept révolutionnaire contre le vieillissement cutané et le relâchement de la peau du visage. C'est l'unique traitement anti-rides aux ultrasons proposé à ce jour aux particuliers.

En effet, l'utilisation des ultrasons apparaît désormais comme l'arme privilégiée et indispensable des professionnels dans la lutte contre les rides.

Grâce au Power 3D, vous allez pouvoir, vous aussi, bénéficier de cette technologie d'avenir chez vous, et en seulement 10 minutes.

Déjà plébiscité par des dizaines de milliers d'utilisateurs au Japon, le Power 3D allie une action INTERNE, en stimulant les processus naturels et physiologiques grâce aux ondes sonores, et une action EXTERNE à travers les produits cosmétiques POWER 3D de très haute qualité.


En 10 minutes seulement, votre peau est reposée, le grain est affiné et votre teint acquiert une superbe luminosité. Ca, c'est l'effet « coup d'éclat ». Mais si vous renouvelez ce soin, à raison deux ou trois fois par semaine, vous apportez à votre peau le moyen efficace de retarder son vieillissement. Garantisiez à votre peau un vrai soin professionnel, sans perdre de temps, ni d'argent !

### 2 - CONTENU DU COFFRET :


- Un appareil à ultrasons POWER 3D
- Un bloc d'alimentation électrique pour votre appareil POWER 3D
- Un flacon de GEL POWER 3D de 200 ml
- Un flacon de LOTION POWER 3D de 200 ml
- Un flacon de REPAIR CREAM POWER 3D de 50 ml.

# POWER 3D

### 3 - DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL POWER 3D.

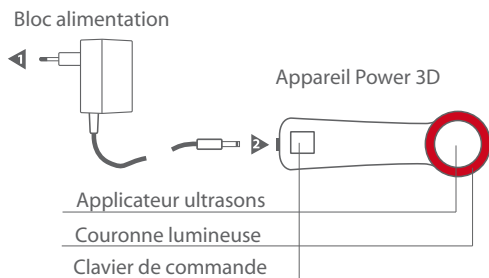

#### Détail du clavier de commande

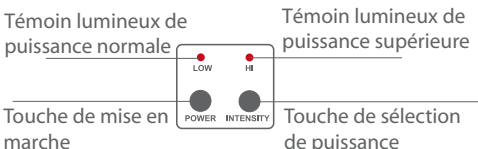

### 4 - MISE EN SERVICE DE VOTRE APPAREIL POWER 3D

Connectez d'abord le bloc alimentation à la prise du secteur.

Tension d'utilisation du bloc alimentation : 230V 50 Hz.  
- Vérifiez que cette tension correspond à celle de votre installation.

Tension de sortie : 24 V DC – 3,6 VA.

Raccordez ensuite la fiche du bloc secteur à l'arrière de votre appareil POWER 3D.

Appuyez ensuite sur la touche de mise en marche (marquée POWER)

Le voyant lumineux marqué LOW s'allume. la puissance d'émission est automatiquement programmée à la mise en marche, à sa valeur normale.

Les ultrasons sont alors émis sur l'applicateur métallique, et l'anneau lumineux s'allume en rouge. Vous pouvez maintenant commencer l'application sur votre visage, enduit de GEL.

Après utilisation, débranchez, nettoyez et rangez l'appareil et son bloc d'alimentation, dans un endroit sec.

### 5 - REGLAGE DE PUISSANCE

Vous pouvez augmenter la puissance de votre applicateur ultrasonore en appuyant sur la touche INTENSITY.

Dans ce cas le voyant lumineux s'allume sur la position HI.

Cette puissance doit être utilisée pour les protocoles « coup d'éclat ».

### 6 - COMMENT APPLIQUER LE SYSTEME POWER 3D

Le programme de traitement se réalise de la façon suivante :

- Une phase d'ACTION, 2 à 3 fois par semaine, avec l'appareil à ultrasons POWER 3D et le GEL POWER 3D.

- Une phase d'ENTRETIEN, réalisée par application manuelle bi-quotidienne, Matin et Soir, de la REPAIR CREAM, après nettoyage de la peau.

### 7 - PHASE « ACTIVE » DU TRAITEMENT POWER 3D LES 3 ETAPES :

**ETAPE 1** - Le soir, après démaquillage, préparez et purifiez votre peau par un nettoyage profond avec la LOTION POWER 3D.

**ETAPE 2** - Réactivez et liftez grâce aux ultrasons :

Appliquez généreusement le GEL POWER 3D sur l'ensemble du visage et du cou.

Les doses conseillées sont les suivantes :

- 6 pressions sur la pompe pour le menton et le cou,  
- 4 à 5 pressions sur la pompe pour chaque côté du visage,

- 3 pressions pour le front.


N'hésitez pas à mettre du GEL sur le contour des yeux et des lèvres.

Répartissez manuellement assez régulièrement.

Mettez en marche l'appareil POWER 3D

Effectuez le massage en déplaçant l'applicateur sur la peau enduite de GEL.

Déplacez l'applicateur en mouvements lents et circulaires, et du bas du visage vers le haut, pour en couvrir toute la surface.

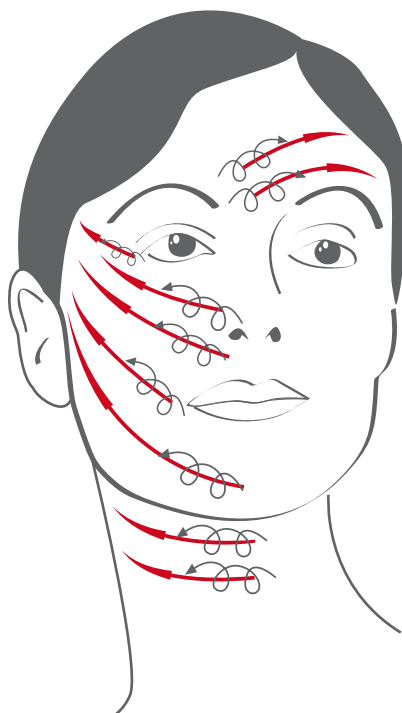

Exercez une légère pression en tenant l'appareil de façon à ce que l'applicateur soit toujours en contact avec la peau.

La durée de l'application est de 5 à 6 minutes

**ETAPE 3** - Restituez et Revitalisez

Une fois le soin terminé, enlevez le GEL restant avec un coton et parfaire le nettoyage avec la LOTION. Une fois la peau sèche, appliquez la REPAIR CREAM sur l'ensemble du visage et du cou.

Ce traitement doit être répété au rythme de 2 à 3 fois par semaine.

### 8 - PHASE « ENTRETIEN »

Pour maintenir et amplifier les bénéfices de votre traitement avec l'applicateur, vous devez entretenir QUOTIDIENNEMENT votre peau.

MATIN et SOIR, après la douche ou le démaquillage, nettoyez la peau avec la LOTION POWER 3D puis appliquer l'émulsion REPAIR CREAM POWER 3D sur l'ensemble du visage et du cou.

**NOTE** : Pour les peaux sensibles, fines, deshydratées et mures, utiliser la LOTION exclusivement le soir, le matin, appliquer directement la REPAIR CREAM après la douche.

### 9 - « COUP D'ÉCLAT »

Vous avez besoin de donner « un coup d'éclat » à votre visage avant une sortie ou un événement. Utilisez pour cela la phase ACTION de votre programme POWER 3D (Paragraphe 7), une heure avant.

Veillez, de toutes les façons, à ne pas cumuler plus de 3 à 4 utilisations hebdomadaires.

### 10 - UTILISATION DES PRODUITS COSMÉTIQUES :

Respectez les conseils d'utilisation indiqués sur les flacons, et dans la présente notice.

#### UTILISATION DU FLACON LOTION POWER 3D

Lors de la première ouverture, il est nécessaire d'ôter l'opercule de protection en aluminium.

Appliquez ensuite à l'aide d'un coton à démaquiller propre.

#### UTILISATION DU FLACON GEL POWER 3D

Lors de la première ouverture, il est nécessaire de déverrouiller la pompe, par une simple rotation, et d'exercer plusieurs pressions sur la pompe avant que le produit ne sorte.

#### UTILISATION DU FLACON REPAIR CREAM POWER 3D

Lors de la première ouverture, après enlèvement du capot, il est nécessaire d'exercer plusieurs pressions sur la pompe avant que le produit ne sorte. Ce flacon est un récipient AIR-LESS dans lequel le produit est totalement isolé de l'air afin de lui conserver une qualité et une pureté constante de la première à la dernière dose.

### 11 – CONSEILS DE SÉCURITÉ ET CONTRE INDICATIONS

1 - L'action de votre applicateur est limitée à la peau. Toutefois son utilisation est déconseillée sur le cou en cas de problème thyroïdique. D'une manière plus générale, il est interdit d'utiliser votre applicateur dans les cas de problèmes cutanés (plaies, cancer, etc...), son usage étant exclusivement réservé aux peaux saines et exemptes de toute affection dermatologique.

2 - Ne pas utiliser, ni recharger l'appareil à proximité de l'eau contenue dans les baignoires, lavabos, douches ou autres récipients.

3 - Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption.

4 - Ne pas laisser l'appareil de façon prolongée à une température inférieure à 0° ou supérieure à 40°C (sous une vitre au soleil par exemple).

5 - Ne jamais utiliser l'appareil en cas d'anomalie de fonctionnement, après une chute par exemple.

6 - Ne pas laisser à la portée des enfants.

